

## Setting up

- Fix the adapter on the foot, draw the surround of the foot's base and cut along the line (schema 1)
- Break the angles like schema 2
- For the sticking, sand down the junction plate's contact area, use the stick ref. Z3602 and follow the instructions for use

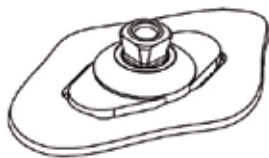


Schéma 1

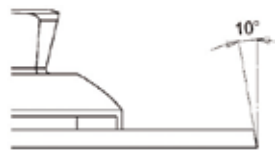


Schéma 2

## Restriction on use / Precautions for use

- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

## Cleaning / Storage

- Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthesis depending on the patient concerned


## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.


*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

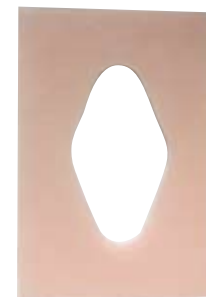

B29

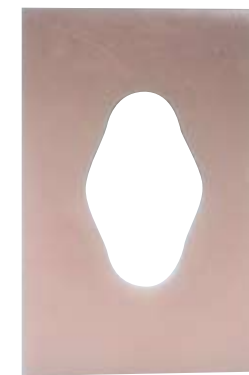

B39

## Désignation

Plaque de jonction en Polyéthylène de couleur chair pour prothèse du membre inférieur.

- B29 : Enfant Poids : 16 g
- B39 : Adulte Poids : 27 g

## Destination

Plaque de jonction à coller à l'esthétique en mousse dans le cas de prothèse endosquelettique.

## Compatibilité

Référence	Adaptateur(s)
B29	B27
B39	B21, B21i

## Mise en place

- ⤿ Monter l'adaptateur sur le pied, tracer le pourtour de l'embase du pied et découper suivant le tracé effectué (voir exemple schéma 1)
- ⤿ Casser les angles suivant le schéma 2
- ⤿ Pour le collage, poncer légèrement les surfaces de la plaque, utiliser la colle référence Z3602 en respectant les consignes d'utilisation

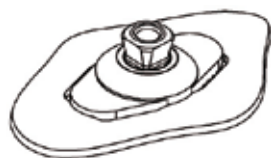


Schéma 1



Schéma 2

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⤿ La plaque de jonction doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller


## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

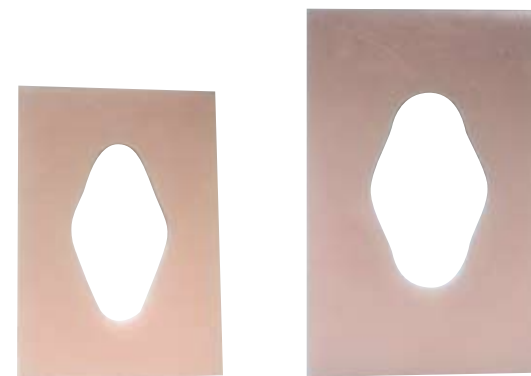

B29

B39

## Designation

Polyethylene skin color malleolar junction plate for lower limb prosthesis.

- ⤿ B29: Child Weight : 16 g
- ⤿ B39: Adult Weight : 27 g

## Purpose

Junction plate to stick on cosmetic foam cover for endoskeletal prosthesis.

## Compatibility

Reference	Adapter(s)
B29	B27
B39	B21, B21i