

Composition

1 internal fitting + 1 external fitting

Spares parts

	M96	M97	M98
Screws	V03406 V0156T	V03406 V0157T	V03405 V0157T
Bearings	V406196	V405165	V405134
Lock	M8809	M6509	M2707
Bal bearings	V0024	V0024	V0024
Spring	M2501	YRC0548	YRC0548
Rivets	V17315	V17312	V17312

Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ At the time of shaping the thigh and leg amounts, be careful not to deform the mechanism of the joint
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⤿ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned


Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

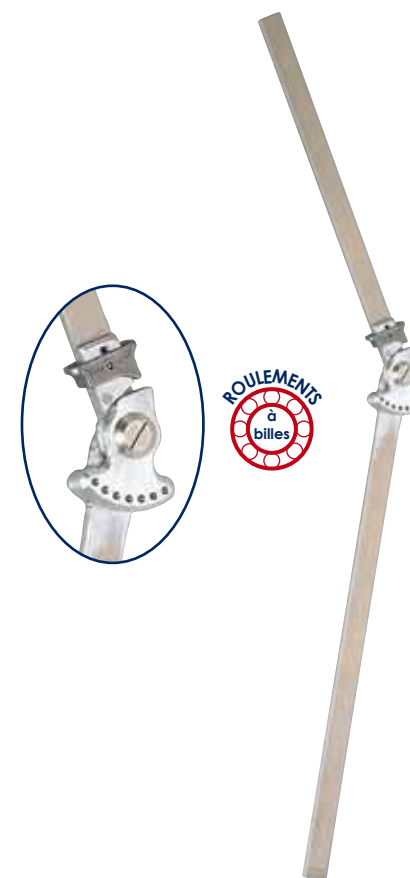

Désignation

Articulation à secteur avec verrou coulisseau et articulation libre plat sur plat.

- ⤿ M96 : Série forte
Montant de section 22 x 6 mm Chape ép. : 6 mm Poids : 800 g
- ⤿ M97 : Série légère
Montant de section 20 x 5 mm Chape ép. : 5 mm Poids : 602 g
- ⤿ M98 : Série enfant
Montant de section 18 x 4 mm Chape ép. : 4 mm Poids : 360 g

Destination

Articulation de genou entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Composition

1 ferrure interne + 1 ferrure externe.

Pièces détachées

	M96	M97	M98
Vis	V03406 V0156T	V03406 V0157T	V03405 V0157T
Roulement	V406196	V405165	V405134
Verrou	M8809	M6509	M2707
Billes inox	V0024	V0024	V0024
Ressort	M2501	YRC0548	YRC0548
Rivets	V17315	V17312	V17312

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les articulations de genou doivent être utilisées dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- Au moment de la mise en forme par griffage des montants de cuisse et de jambe, veiller à ne pas déformer le mécanisme de l'articulation
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Designation

Adjustable lock joint with ball catch and free motion over lap joint.

- M96 : Strong serie
Upright cross section : 22 x 6 mm Cover : 6 mm Weight : 800 g
- M97 : Light serie
Upright cross section : 20 x 5 mm Cover : 5 mm Weight : 602 g
- M98 : Child serie
Upright cross section : 18 x 4 mm Cover : 4 mm Weight : 360 g

Purpose

Knee articulation used for the manufacture of orthosis for a lower limb.