

Composition

1 hip parts.

Spares parts

	N33	N34	N35
Lock	N3009	N3109	N3209
Ball bearing	V0024	V0024	V0024
Screws	V0153 V03606	V0109 V03606	V0107 V03606
Bearing	V407196	V405165	V405134
Springs	YRC0548	YRC0548	YRC0548

Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel
- ⤿ Heat the part with a blowtorch before modifying its shape (any cold shaping will nullify the guarantee)

Cleaning / Storage

- ⤿ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned


Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

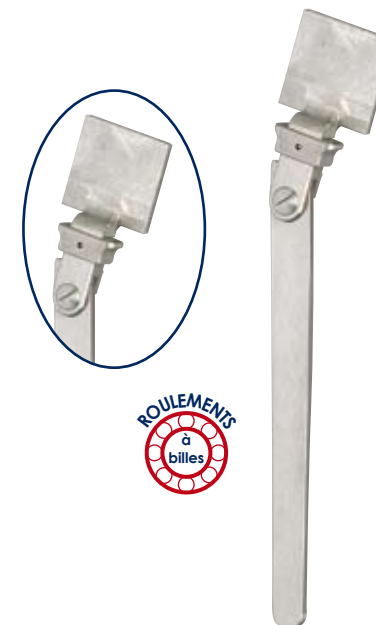

Désignation

Pièces de hanche en acier demi-dur avec verrou coulissant.

- ⤿ N33 : Série forte
Section montant : 25 x 6 mm
Chape ép. : 6 mm
Poids : 600 g
- ⤿ N34 : Série légère
Section montant : 22 x 5 mm
Chape ép. : 5 mm
Poids : 400 g
- ⤿ N35 : Série enfant
Section montant : 20 x 4 mm
Chape ép. : 4 mm
Poids : 200 g

Destination

Pièce de hanche entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Composition

1 pièce de hanche.

Pièces détachées

	N33	N34	N35
Verrou	N3009	N3109	N3209
Billes	V0024	V0024	V0024
Vis	V0153 V03606	V0109 V03606	V0107 V03606
Roulement	V407196	V405165	V405134
Ressort	YRC0548	YRC0548	YRC0548

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les pièces de hanche doivent être utilisées dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Chauffer la pièce au chalumeau avant de modifier sa forme (tout formage à froid exclut la garantie)

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller


Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

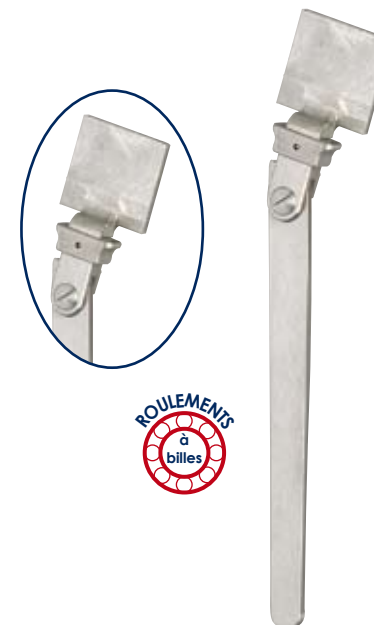

Designation

Hip parts in semi-hardened steel.

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| ➤ N33 : Strong serie
Cross section : 25 x 6 mm | Cover : 6 mm | Weight : 600 g |
| ➤ N34 : Light serie
Cross section : 22 x 5 mm | Cover : 5 mm | Weight : 400 g |
| ➤ N35 : Child serie
Cross section : 20 x 4 mm | Cover : 4 mm | Weight : 200 g |

Purpose

Knee articulation used for the manufacture of orthesis for a lower limb.