

## Restriction on use / Precautions for use

Tightening torques (use key (Ref. : ZOC102))

Screw	Torques (Nm)
V05I-0616	9
V02I-0620	12

- Assemble the screws using normal (Ref. : Z31-243) locking compound
- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

## Cleaning / Storage

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

STARFLEX



## Désignation

Adaptateur tubulaire 4 trous en alliage léger pour tube Ø 30 mm

- Poids : 55 g

## Destination


Élément de structure entrant dans la fabrication de prothèses endosquelettiques du membre inférieur

- Limite de poids : 100 kg

## Compatibilités

- Adaptateurs de la gamme STARFLEX

## Pièces détachées

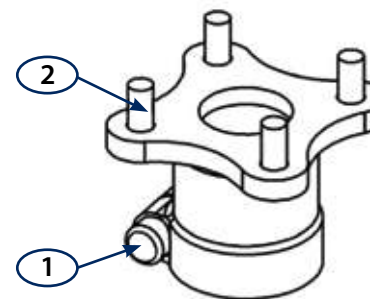

1	Vis CHC M6 L20	V02I-0620
2	Vis FHC M6 L16	V05I-0616

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

Vis	Couple (Nm)
V05I-0616	9
V02I-0620	12

- ⌚ Monter les vis avec du frein filet normal (Réf. : Z31-243)
- ⌚ L'adaptateur doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⌚ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⌚ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- ⌚ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⌚ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

STARFLEX



## Designation

Light alloy 4 holes tubular adapter for tube Ø 30 mm

- ⌚ Weight : 55 g

## Purpose


Structural element used to make endoskeletal prostheses of the lower limbs

- ⌚ Weight limit : 100 kg

## Compatibility

- ⌚ The pyramidal adaptors are compatible with all the tubes and adaptors in the STARFLEX range

## Spares parts

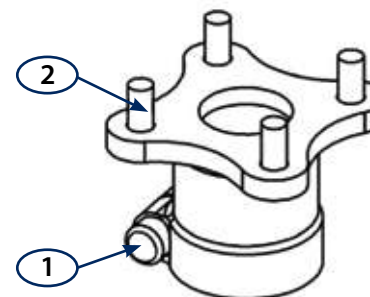

1	CHC screw M6 L20	V02I-0620
2	FHC screw M6 L16	V05I-0616