


Réglages

Vérifier que le dégauchi de l'appareil soit optimal.

Pièces détachées

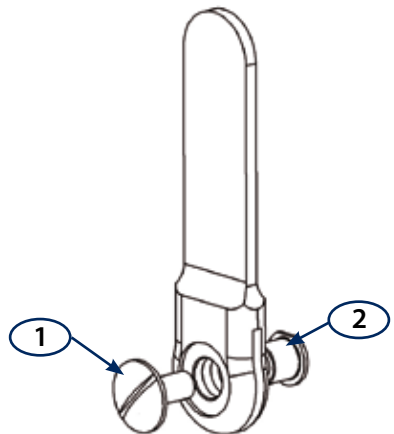

		L14NXST	L15NXST
1	Vis d'articulation	V0013	V0016
2	Culot d'articulation	V009	V008

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Le cintrage des chapes doit être réalisé à l'aide des outils préconisés selon la procédure de mise en oeuvre ZNXFAB
- ↪ Ne pas mater les vis
- ↪ Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- ↪ Le bon maniement de l'appareil doit être expliqué au patient
- ↪ L'articulation doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 2 ans pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Groupe G2M

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com
www.groupe-g2m.com

Janton

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

L14NXST/L15NXST



Gamme Nx

Désignation

Paire d'articulations de cheville à chape pour orthèse du membre inférieur.

- ↪ L14NXST : articulations à stratifier
section 20 x 5 Série forte Acier inoxydable Poids : 136 g
- ↪ L15NXST : articulations à stratifier
section 18 x 4 Série légère Acier inoxydable Poids : 106 g

Destination

Articulation de cheville entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Compatibilités

Articulation section 20 x 5 :

- ↪ ½ étrier inox L53NX-1

Articulation section 18 x 4 :

- ↪ ½ étrier inox L54NX-1

Mise en place

Articulation

- ↪ La vis (1) devra être montée au frein filet Z31-243 (LOCTITE 243) avant mise en place de l'appareil sur le patient
- ↪ Utiliser la graisse molyckote Z10 pour le graissage des pièces en mouvement
- ↪ Afin d'optimiser vos montage, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de même section


Pour la réalisation de l'appareil, se reporter à la procédure de mise en oeuvre ZNXFAB et utiliser les outillages de la mallette ZNXFAB.

Articulation de cheville à chape pour stratification

Réglages

Vérifier que le dégauchi de l'appareil soit optimal.

Pièces détachées

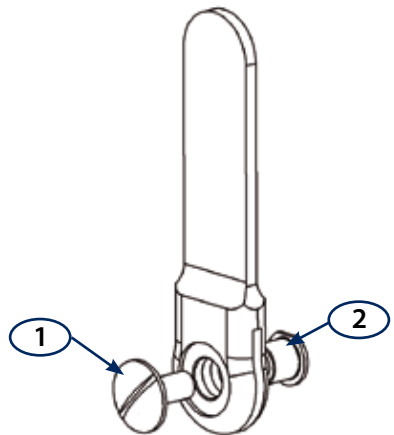

		L14NXST	L15NXST
1	Vis d'articulation	V0013	V0016
2	Culot d'articulation	V009	V008

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Le cintrage des chapes doit être réalisé à l'aide des outils préconisés selon la procédure de mise en oeuvre ZNXFAB
- ↪ Ne pas mater les vis
- ↪ Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- ↪ Le bon maniement de l'appareil doit être expliqué au patient
- ↪ L'articulation doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 2 ans pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.



168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com
www.groupe-g2m.com

L14NXST/L15NXST



Gamme Nx

Désignation

Paire d'articulations de cheville à chape pour orthèse du membre inférieur.

- ↪ L14NXST : articulations à stratifier
section 20 x 5 Série forte Acier inoxydable Poids : 136 g
- ↪ L15NXST : articulations à stratifier
section 18 x 4 Série légère Acier inoxydable Poids : 106 g

Destination

Articulation de cheville entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Compatibilités

Articulation section 20 x 5 :

- ↪ ½ étrier inox L53NX-1

Articulation section 18 x 4 :

- ↪ ½ étrier inox L54NX-1

Mise en place

Articulation

- ↪ La vis (1) devra être montée au frein filet Z31-243 (LOCTITE 243) avant mise en place de l'appareil sur le patient
- ↪ Utiliser la graisse molyckote Z10 pour le graissage des pièces en mouvement
- ↪ Afin d'optimiser vos montage, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de même section

Pour la réalisation de l'appareil, se reporter à la procédure de mise en oeuvre ZNXFAB et utiliser les outillages de la mallette ZNXFAB.