

## Composition

1 hip parts.

## Spares parts

	N30	N31	N32
Articulation screws	V0150	V0151	V0152

## Restriction on use / Precautions for use

- ⌋ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⌋ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ⌋ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel
- ⌋ Heat the part with a blowtorch before modifying its shape (any cold shaping will nullify the guarantee)

## Cleaning / Storage

- ⌋ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⌋ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned


## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

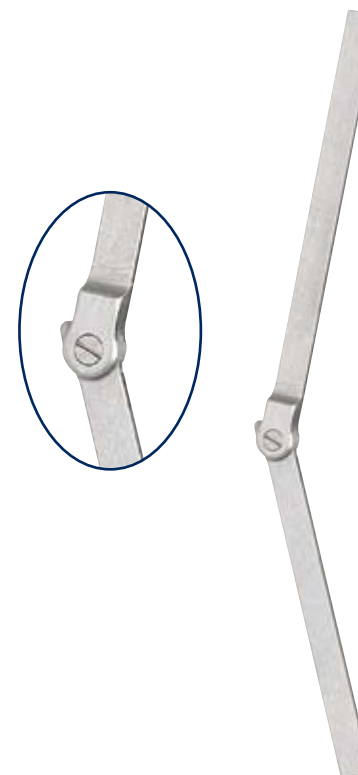

## Désignation

Pièces de hanche en acier demi-dur à chape sur le montant supérieur, montants haut et bas à réserve.

- ⌋ N37 : Série forte  
Section montant du haut : 22 x 6 mm  
Chape ép. : 6 mm  
Section montant du bas : 25 x 6 mm  
Poids : 650 g
- ⌋ N38 : Série légère  
Section montant du haut : 20 x 5 mm  
Chape ép. : 5 mm  
Section montant du bas : 22 x 5 mm  
Poids : 450 g
- ⌋ N39 : Série enfant  
Section montant du haut : 18 x 4 mm  
Chape ép. : 4 mm  
Section montant du bas : 20 x 4 mm  
Poids : 300 g

## Destination

Pièce de hanche entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

## Composition

1 pièce de hanche.

## Pièces détachées

	N30	N31	N32
Vis d'articulation	V0150	V0151	V0152

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les pièces de hanche doivent être utilisées dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Chauffer la pièce au chalumeau avant de modifier sa forme (tout formage à froid exclut la garantie)

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



## Designation

Steel hip part in semi-hardened steel with cover on upper upright, with upper and lower uprights with reserve.

- N30 : Strong serie  
Upright cross section : 22 x 6 mm  
Cover : 6 mm  
Lower cross section : 25 x 6 mm  
Weight : 650 g
- N31 : Light serie  
Upright cross section : 20 x 5 mm  
Cover : 5 mm  
Lower cross section : 22 x 5 mm  
Weight : 450 g
- N32 : Child serie  
Upright cross section : 18 x 4 mm  
Cover : 4 mm  
Lower cross section : 20 x 4 mm  
Weight : 300 g

## Purpose

Knee articulation used for the manufacture of orthesis for a lower limb.